




Cannule nasali

Gamma di cannule nasali per pazienti adulti, pediatrici e neonatali

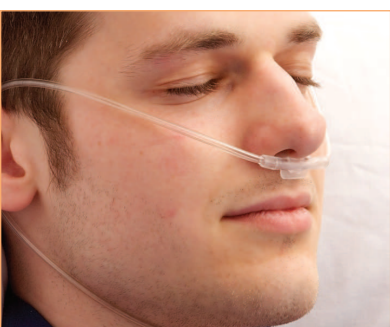

Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Cannule Nasali



Cannule nasali

Cannula nasale convenzionale

La gamma di nasocannule per pazienti adulti, pediatrici e neonatali è disponibile in un'ampia varietà di modelli per soddisfare le diverse necessità dei pazienti. Tutti i tubi per ossigeno della gamma sono caratterizzati da un design "multicanale" che consente il flusso di ossigeno anche in caso di schiacciamento.

Disponibili anche in versione Satin


Le nasocannule Intersurgical versione Satin sono prodotte in un materiale soffice che crea meno frizione a viso e orecchie del paziente. I test dimostrano un 20% in meno di frizione rispetto ai modelli standard.

Forma dei rebbi


Sono inoltre disponibili nasocannule con le seguenti conformazioni di rebbi:




▶ Video disponibile su www.intersurgical.it

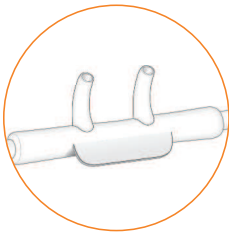


Rebbi curvi:
migliore adattabilità anatomica

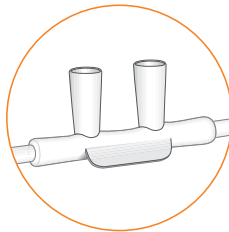

Rebbi svasati:
rallentano il flusso di ossigeno

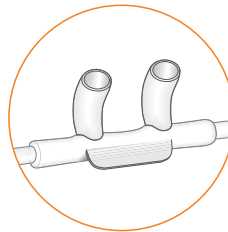

Rebbi curvi e svasati:
combinano i vantaggi dei due modelli

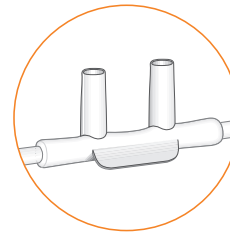

Rebbi dritti



Rebbi curvi con protezioni auricolari:
forma anatomica per una maggiore adattabilità e comfort del paziente

Protezioni per le orecchie

Le protezioni per le orecchie, fornite in dotazione alle nasocannule, costituiscono un'ulteriore dettaglio pensato per il comfort dei pazienti.

Senza Ftalati

La gamma di cannule nasali neonatali prive di Ftalati è stata ideata per limitare l'esposizione a DEHP di pazienti neonati e prematuri, ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale.





Tubo per ossigeno "Multicanale"

Consente il passaggio del flusso di ossigeno anche in caso di attorcigliamento del tubo

Fermo anti-scivolo

Permette al paziente di adattarla per il proprio comfort

Priva di lattice

Ideale per pazienti con allergia al lattice

Materiale trasparente

Trasparente (disponibile anche in versione Satin)

Design retroauricolare

Posizionamento saldo (disponibili protezioni per le orecchie per un maggiore comfort)

Rebbi morbidi


Riducono al minimo le irritazioni

Staffa


Mantiene il posizionamento orrimale dei rebbi

Versione con tubo corto

Ideale per uso domiciliare

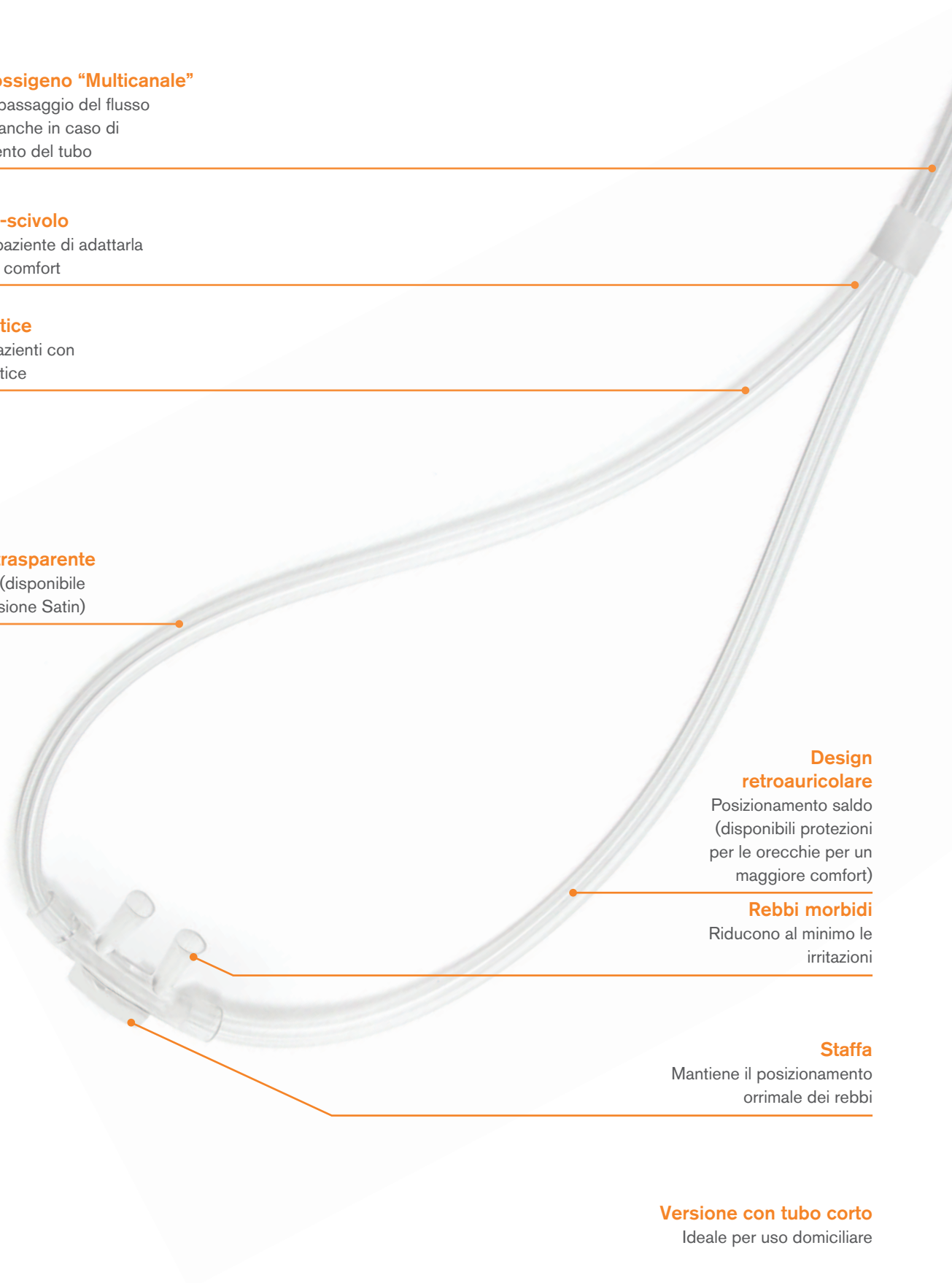

Cannule nasali per adulti

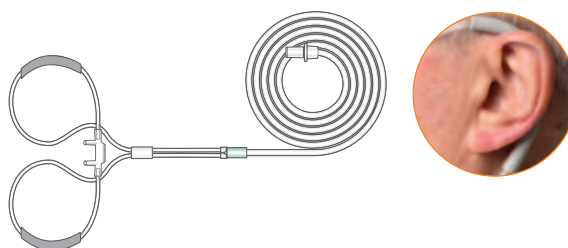




1165002

Codice	Descrizione	Lunghezza	Q.tà per scatola
1161000	Cannula nasale per Adulti, rebbi diritti e tubo ossigeno	1.8m	50
1161004	Cannula nasale per Adulti, rebbi diritti e tubo ossigeno	2.1m	50
1162000	Cannula nasale per Adulti, rebbi diritti e tubo ossigeno	5m	20
1169000	Cannula nasale per Adulti, rebbi diritti, versione corta	0.5m	100
1165000	Cannula nasale per Adulti, rebbi curvi e tubo ossigeno	1.8m	50
1161020	Cannula nasale per Adulti Satin , rebbi diritti e tubo ossigeno	1.8m	50
1165020	Cannula nasale per Adulti Satin , rebbi curvi e tubo ossigeno	1.8m	50
1165002	Cannula nasale per Adulti, rebbi curvi, protezione per orecchie e tubo ossigeno	2.1m	50
1165003	Cannula nasale per Adulti, rebbi curvi, protezione per orecchie e tubo ossigeno	5m	40
1165021	Cannula nasale per Adulti Satin , rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1m	50
1161021	Cannula nasale per Adulti Satin , rebbi diritti e tubo ossigeno	2.1m	50
1166000	Cannula nasale per Adulti, rebbi svasati e tubo ossigeno	1.8m	50
1167000	Cannula nasale per Adulti, rebbi curvi/svasati e tubo ossigeno	1.8m	50
1168000	Cannula nasale per Adulti, rebbi curvi/svasati, versione corta	0.5m	100


Cannule nasali pediatriche e neonatali

Codice	Descrizione	Lunghezza	Q.tà per scatola
1163000	Cannula nasale Pediatrica, rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1m	50
1164000	Cannula nasale Neonatale, rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1m	50

Cannule nasali prive di ftalati

Codice	Descrizione	Lunghezza	Q.tà per scatola
1160002	Cannula nasale Infantile con rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1m	50 
1160001	Cannula nasale Neonatale con rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1m	50 
1160000	Cannula nasale Prematuri con rebbi curvi e tubo ossigeno	2.1m	50 

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari

 Modello privo di ftalati per pazienti pediatrici, infantili, neonatali e prematuri



Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
 T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e ISO 14001:2015

Rispetta l'ambiente!
 Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente privilegia il fronte/retro.

Il distributore Intersurgical S.p.A. è certificato ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016

IS10.8_IT • Issue 9 08.18