



FiltaNeb™

Kit nebulizzatore Cirrus™2, maschera Intersurgical EcoLite™ adulti non ventilata con filtro e tubo



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Nebulizzazione



Per soddisfare le esigenze del mercato sanitario globale in continua evoluzione, è stato sviluppato un prodotto che permette di ridurre le particelle che fuoriescono nell'ambiente durante la terapia con nebulizzazione. FiltaNeb™ include una maschera non ventilata, progettata sulla base della maschera Intersurgical EcoLite™ e dotata di un filtro sulla porta di esalazione. Il bordo è di colore verde così da distinguere questa maschera non ventilata dalle maschere standard per aerosol. Per garantire il raggiungimento di una tenuta eccellente, il kit contiene un elastico supplementare.

Il sistema permette una riduzione >95% in termini di rilascio di particolato nell'ambiente. Questo aiuta a minimizzare i gas potenzialmente infetti espirati e le fuoriuscite della nebulizzazione, limitando il rischio di contaminazione degli operatori sanitari.

Il nebulizzatore Cirrus™2 include un'ampolla graduata che indica la quantità di farmaco presente al suo interno. L'ampolla è dotata di una chiusura semplice e veloce per agevolare la connessione e lo sganciamento con un quarto di giro, velocizzando in questo modo i tempi di rabbocco del medicinale e fornendo al contempo una tenuta sicura e saldamente collegata al corpo del nebulizzatore.

Il nebulizzatore Cirrus™2 è progettato per somministrare farmaci tramite nebulizzazione a deposito tracheobronchiale. Ad un flusso di gas erogato di 8 L/min, il diametro medio di massa (MMD) è 3.1 micron.

Tenuta nasale incurvata

Si adatta a forme differenti del viso così da evitare che l'aerosol fuoriesca dalla parte superiore della maschera

Filtro sulla porta di esalazione

Riduce la fuoriuscita delle particelle nell'ambiente durante la nebulizzazione

Ampolla graduata

Preparazione più rapida

Basso volume residuo

Riduce lo spreco di farmaco

Elastico supplementare

Per una migliore tenuta tra la maschera e il viso del paziente

Morbida sigillatura intorno al viso

Aumenta il comfort del paziente

Bordo di colore verde


Differenzia le maschere non ventilate da quelle standard per aerosol

Scelta tra appoggio "sul mento" o "sotto il mento"

L'appoggio variabile offre una sigillatura migliore adattabile a tutte le conformazioni di visi

Chiusura semplice e veloce

Per una rapida connessione e sganciamento

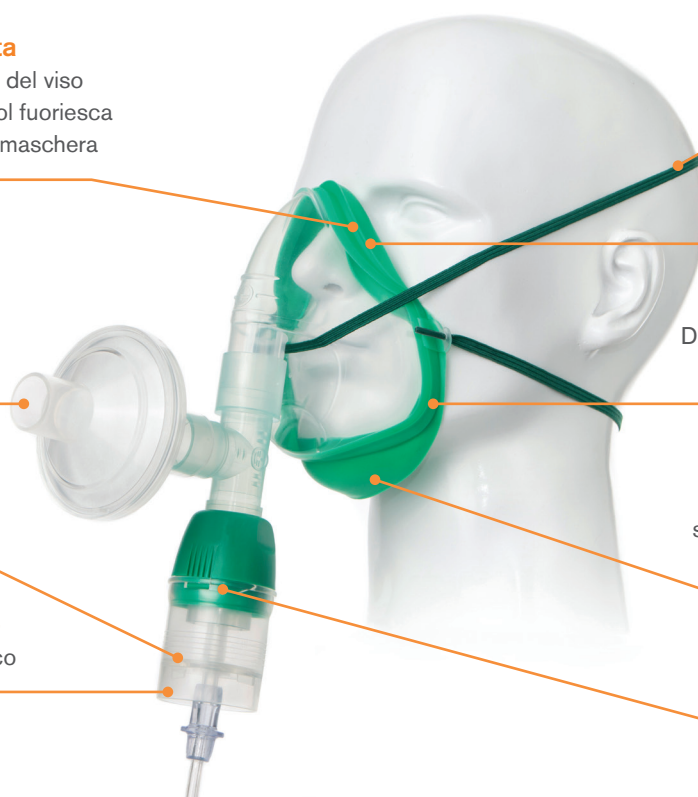

Codice	Descrizione	Lunghezza tubo	Q.tà/scatola
1453044	Kit FiltaNeb™ con nebulizzatore Cirrus™2, maschera EcoLite™ adulti non-ventilata, filtro e tubo	2.1m	12

Prodotto a basso impatto ambientale



Intersurgical S.p.A. Via Tonino Morandi 12, 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418 234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015



Ricicla!

IS10.39_IT • Issue 3 11.21