

QuadraLite™

una maschera facciale per anestesia veramente **unica**



QuadraLite™

una maschera facciale per anestesia veramente **unica**

Bordo di tenuta morbido

Una tenuta confortevole ma flessibile per adattarsi alle diverse misure del viso

Conchiglia trasparente

Per una visibilità eccellente



Codice colore

I colori si abbinano a quelli degli altri prodotti Intersurgical per una selezione più semplice

Forma anatomica

Aderenza perfetta ai vari profili del viso combinata ad un ridotto spazio morto

Design unico sviluppato da Intersurgical


QuadraLite™ non richiede l'utilizzo di un cuscino gonfiabile. Un'innovativa tecnica di stampaggio ha reso possibile la combinazione di due materiali ideali. Ciò ha portato alla creazione di una maschera facciale con una forma anatomica e una tenuta morbida. Il risultato sono comfort, adattabilità e tenuta eccellenti e una conchiglia trasparente che permette la visibilità del paziente.

Quattro misure per tutti i pazienti

La maschera è leggera e richiede una pressione minima per ottenere una perfetta aderenza su un'ampia gamma di visi diversi per conformazione e dimensioni. Solo quattro misure sono necessarie, invece delle tradizionali sette, per offrire una soluzione per ogni paziente.

Scegli il verde: prodotto a basso impatto ambientale

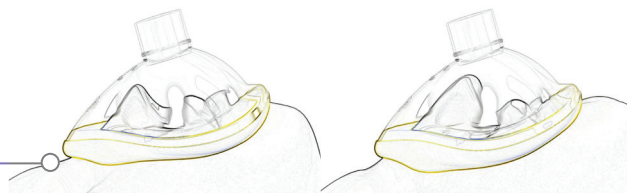


QuadraLite™ fa parte della Linea Eco di prodotti Intersurgical privi di PVC progettati per avere un basso impatto ambientale. Le maschere sono prive di ftalati per una maggiore sicurezza del paziente e il numero seriale è impresso direttamente sulla maschera per permetterne la tracciabilità.



Per maggiori informazioni visita:

www.intersurgical.com/products/single-use-anaesthetic-masks

Guida rapida per il confronto delle misure

Paziente	Età	Peso (Kg)	Misura maschera tradizionale	Misura QuadraLite™
Neonatale	Pretermine	< 2	0	 Codice: 7191000
	Termine	2 – 4		
Infantile	3 mesi	6	1	
	6 mesi	8		
	9 mesi	9		
Pediatrico	1 anno	10	2	
	2 anni	12		
	3 anni	14		
	4 anni	16		
	5 anni	18		
Adulto Small	6 anni	20	3	
	7 anni	23		
	8 anni	26		
	9 anni	28		
	10 anni	32		
	11 anni	35		
Adulto Medium	12 anni	39	4	 Codice: 7193000
	13 anni	44		
	14 anni	50		
	15 anni	54		
Adulto Large	16 anni	58	5	
	16+ anni	60 – 120		
Adulto Extra Large	16 + anni	> 120	6	 Codice: 7194000

Informazioni per l'ordine

QuadraLite™ maschera per anestesia

7194000



22F

7193000



22F

7192000








22F

7191000



15M

Codice	7194000	7193000	7192000	7191000
Q.tà per scatola	35	35	25	30
Misura maschera	5-6	3-4	2-3	0-1
Dimensioni paziente	Large	Medium	Small	Infant
Dimensioni connessione	22F	22F	22F	15M
Codice colore				
Anello uncinato	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓

Codice	Descrizione prodotto	Q.tà per scatola
7089000	Anello uncinato per maschera per anestesia QuadraLite™ ed EcoMask™ con porta da 22mm	30

ISS.24_IT Issue 2 10.13