




# STARMed CaStar R

Casco per ventilazione meccanica non-invasiva (NIV)

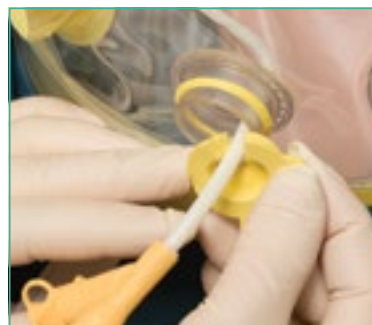

Critical Care ▪ Interfacce Paziente ▪ **STARMed**

# STARMed CaStar R casco per NIV

## StarMed CaStar R

Il casco CaStar R è un'interfaccia paziente confortevole, versatile e leggera per la ventilazione meccanica non-invasiva (NIV) progettata per offrire un'alternativa ai tradizionali metodi di somministrazione della terapia NIV. CaStar R è ben tollerato anche per periodi prolungati e contribuisce a ridurre i rischi associati alle intubazioni endotracheali e all'uso della maschera facciale. Può essere utilizzato sia in posizione semi-seduta che supina.

### Caratteristiche tecniche

- Prodotto con materiali privi di ftalati
- Connettori 22M secondo gli standard ISO
- Comode bretelle ascellari di ancoraggio atraumatiche

- Cuscino gonfiabile integrato
- Accessi morbidi per sonde o cateteri integrati al casco
- Nuovo oblò di accesso al paziente, dotato di valvola antisoffocamento bi-direzionale ad apertura automatica in mancanza di pressione
- La tenuta del sistema è assicurata da una membrana elastica che aderisce alla parte superiore del tronco del paziente, quando il casco è gonfio

#### Bibliografia:

- Mojoli F, et al. An optimized set-up for helmet noninvasive ventilation improves pressure support delivery and patient-ventilator interaction, Intensive Care Med. 2013 Jan;39(1):38-44
- Vargas F, et al. Helmet with specific settings versus facemask for noninvasive ventilation, Crit Care Med. 2009 Jun;37(6):1921-8
- Mojoli F, et al. Carbon dioxide rebreathing during non-invasive ventilation delivered by helmet: a bench study, Intensive Care Med. 2008 Aug;34(8):1454-60
- Antonelli M, et al. New treatment of acute hypoxemic respiratory failure: Noninvasive pressure support ventilation delivered by helmet - A pilot controlled trial, Crit Care Med. 2002 Mar;30(3):602-8



## CaStar R casco per NIV con cuscino integrato, valvola antisoffocamento bi-direzionale e oblò\*

Codice	Misura	Circonferenza collo	Q.tà per scatola
CP211XXL/2R	Extra Extra Large	≥50cm	5
CP211XL/2R	Extra Large	45-52cm	5
CP211L/2R	Large	40-47cm	5
CP211M/2R	Medium	34-41cm	5
CP211S/2R	Small	27-34cm	5
CP211XS/2R	Extra Small	17-27cm	5



[www.intersurgical.com/info/starmed](http://www.intersurgical.com/info/starmed)

Video disponibile su [www.intersurgical.com](http://www.intersurgical.com)

Richiesta info

\*Circuito per ventilazione non incluso, ordinabile separatamente. Per la gamma di accessori fare riferimento al sito web. Custom pack disponibili su richiesta del cliente.



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 (MO), Italia  
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Fabbricante:  
Intersurgical S.p.A.  
Mirandola (MO) Italy

#### Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispensio di energia e carta.  
Se desideri stampare ugualmente, privilegia il fronte/retro.

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.

IS1.18\_IT • Issue 8 09.20